



德國製造

SOMNOtouch™ NIBP



技術規格

數據收集

USB數據傳輸，12位元信號分辨率，可在 1Hz 至 512Hz 範圍內獨立調整採樣率。

數據儲存

內置 512MB 數據容量。
通過底座進行充電和數據傳輸。

尺寸及重量

74 x 55 x 16 毫米，58克（含電池）

顯示器

高像素彩色觸控屏幕（320 x 240像素）

電源

充電鋰離子電池，24小時長時間記錄。

軟件分析

DOMINO light



產品影片



登記預約

聯絡我們 2402-2188
www.homecare-medical.com



九龍 荔枝角 總公司

荔枝角長裕街 15號永明工業中心4樓 1-3室
Units 1-3, 4/F, Wing Ming Industrial Centre, 15 Cheung Yue Street, Lai Chi Kok
電話：(852) 2402-2188



九龍 尖沙咀 陳列室

尖沙咀堪富利士道3-3A號時財商業大廈10樓B室
Rm B, 10/F, Season Commercial Building, 3-3A Humphreys Avenue, Tsim Sha Tsui
電話：(852) 2992-0226



港島 銅鑼灣 陳列室

銅鑼灣渣甸街5-19號京華中心12樓1206室
Rm 1206, 12/F, Capitol Centre, 5-19 Jardine's Bazaar, Causeway Bay
電話：(852) 2882-7922

嶄新24小時連續血壓監測 SOMNOtouch™ NIBP

無袖帶
醫學臨床認證

德國製造



ESH 歐洲高血壓學會
國際醫學驗證



香港獨家供應商
www.homecare-medical.com
(852) 2402-2188


PTT 專利運算技術 Pulse Transit Time

- 採集脈搏由心臟傳到指尖的時間推算血壓數值
- 臨床認證通過ESH國際醫學驗證所有指標要求



#專利編號: DE 102005014048.3-35,
EP 20060001181.4-1526, US 11/364174 US 2006/0217616 A1, 7374542

#醫學臨床認證文獻: Bilo, G., Parati, G. et al., Validation of the SOMNOtouch™ NIBP non-invasive continuous blood pressure monitor according to the European Society of Hypertension International Protocol revision 2010. Blood Pressure Monitoring. 2015

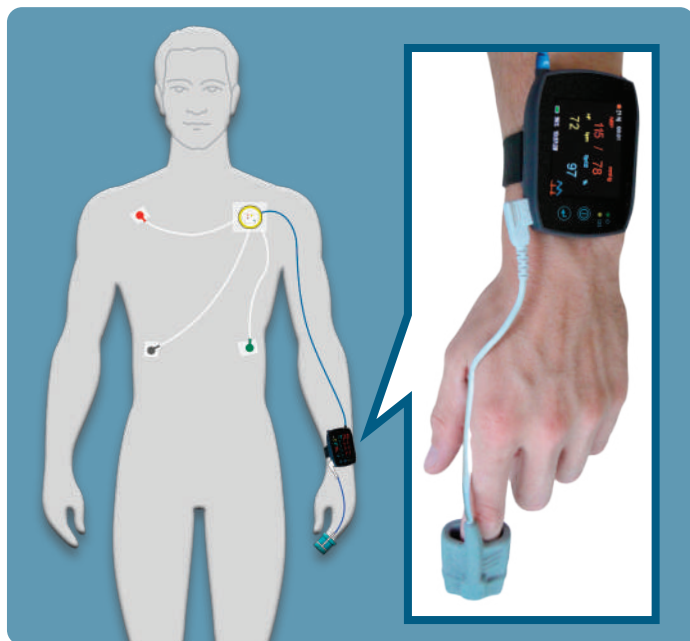

打破傳統多項限制 表現更精準・更詳盡

新功能	SOMNOtouch™ NIBP	舊式血壓測量
無間斷連續記錄	清晰顯示整日血壓走勢及微細變化 有助找出中風及心肌梗塞的高危因素	採樣數據少 資料斷斷續續 無法看到血壓的細微變化
記錄睡眠時真實血壓變化	無須使用袖帶脹氣量度血壓 令睡眠不受影響 反映入睡後真實血壓狀況	採樣數據少 資料斷斷續續 無法看到血壓的細微變化
睡眠時段自動感應	機內設活動感應器推測睡眠時間 分析睡眠與非睡眠時段的 不同血壓波動	無此功能
內置身體姿勢感應	身體靜液壓效應 (Hydrostatic Pressure) 令不同身體姿勢構成血壓量度誤差 內置身體姿勢感應器能有效 消除靜液壓效應引致的誤差	無此功能
同步血壓及血氧	可顯示血壓波動成因 是否跟睡眠窒息/缺氧相關	只可量度簡單血壓 無任何其他參數可參考
舒適 寧靜	靜音操作 智能精巧手錶設計	每次量度血壓時袖帶都會擠壓 手臂引起不適及發出聲響 須隨身攜帶主機